

beurer

Ενισχυτές ακοής

*Based on:
Export catalog 2021
P/N 759.352*

Markus Neuwirth
Head of Product Training
March 2021



Σύγκριση ενισχυτή ακοής με ακουστικό βαρηκοΐας

beurer[®] medical

Ενισχυτής ακοής

Ο ενισχυτής ακοής είναι μια συσκευή που βοηθά τους ανθρώπους να ακούνε καλύτερα. Αυτό επιτυγχάνεται ενισχύοντας τους ήχους και μετά μεταδίδοντάς τους στο αυτί. Ο ενισχυτής ακοής δεν μπορεί ούτε να αποτρέψει ούτε να αναστρέψει την οργανική απώλεια ακοής. Ο ενισχυτής ακοής σας προσφέρει μια ποικιλία εφαρμογών. Ανεξάρτητα από το αν θέλετε να παρακολουθήσετε μια ταινία, να συνομιλήσετε με φίλους ή απλά να αισθανθείτε σαν να ακούτε τους ήχους της φύσης στο δάσος, ο ενισχυτής ακοής σας βοηθά να ακούτε τους ήχους πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Ακουστικό βαρηκοΐας


Ένα ακουστικό βαρηκοΐας είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη βελτίωση της ακοής κάνοντας τον ήχο να ακούγεται σε ένα άτομο με απώλεια ακοής. Απαιτούνται εντατικές εξετάσεις ακοής με ακουστικό για να διαπιστωθεί σε ποιες συχνότητες το άτομο έχει προβλήματα ακοής. Το ακουστικό υποστηρίζει το άτομο μόνο στο συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων.



5 γεγονότα που είναι καλό να γνωρίζουμε

1. Οι ενισχυτές ακοής **δεν χρειάζεται να είναι μεγάλοι, ογκώδεις και αντιαισθητικοί**. Οι ενισχυτές ακοής σταμάτησαν από καιρό να είναι τόσο δύσχρηστοι όσο στο παρελθόν. Οι σύγχρονοι ενισχυτές ακοής είναι διακριτικοί, εύχρηστοι και κομψοί.
2. Οι ενισχυτές ακοής **δεν βλάπτουν την ακοή**. Άτομα με κακή ακοή που δεν χρησιμοποιούν τους ενισχυτές **αντιμετωπίζουν τη σταδιακή απώλεια της ακοής**. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό οδηγεί σε εκφυλισμό του νεύρου της ακοής και η μετάδοση στον εγκέφαλο γίνεται όλο και χειρότερη.
3. Υπάρχει ένας κατάλληλος ενισχυτής ακοής για όλους. Οι χρήστες δεν πρέπει να βασίζονται στην απόφασή τους στην τιμή, αλλά στο ποια συσκευή βρίσκουν **καλύτερη για καθημερινή χρήση**. Οι ενισχυτές ακοής πρέπει να προσαρμόζονται στις **ατομικές απαιτήσεις** και να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία ακοής.
4. Οι δυσκολίες ακοής που σχετίζονται με την ηλικία επηρεάζουν γενικά και τα **δύο αυτιά**. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, π.χ. **παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς θορύβους, ασθένειες ή ατυχήματα**. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επηρεάζεται μόνο το ένα αυτί. Από την άλλη πλευρά, οι δυσκολίες ακοής που σχετίζονται με την ηλικία αφορούν γενικά και τα δύο αυτιά. Μόνο μέσω της ακοής και στα δύο αυτιά μπορείτε να εντοπίσετε ακριβώς την κατεύθυνση των ήχων, για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο που κινείται.
5. Το να ακούτε καλά σας δίνει έναν **αέρα αυτοπεποίθησης**. Στον σημερινό κόσμο, η καθημερινή μας ζωή περιλαμβάνει **περισσότερη επικοινωνία** από ποτέ. Το να μπορείς να ακούσεις καλά σημαίνει να μπορείς **να συμμετέχεις σε συνομιλίες με αυτοπεποίθηση**. Η ικανότητα συνομιλίας και κατανόησης **ενισχύει την αυτοπεποίθηση**.

Behind-The-Ear

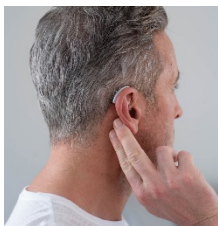

BTE (Πίσω από το αυτί)

- ✓ όλα τα λειτουργικά μέρη, όπως π.χ. το ηχείο είναι ενσωματωμένο στο περίβλημα
- ✓ Ο ήχος μεταδίδεται στο αυτί μέσω της αγωγιμότητας του αέρα στον πλαστικό σωλήνα
- ✓ **Πλεονεκτήματα:** Χάρη στο σχεδιασμό είναι ιδιαίτερα εύχρηστοι για τους ηλικιωμένους



RIC (Μέσα στο αυτί)

- ✓ Εδώ το ηχείο βρίσκεται απευθείας στο αυτί
- ✓ **Πλεονεκτήματα:** Καλή ακουστική χάρη στην απευθείας μετάδοση του ήχου μέσα στο αυτί.

In-The-Ear



ITE (Μέσα στον ακουστικό πόρο)

- ✓ Όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται απευθείας μέσα στον ακουστικό πόρο
- ✓ **Πλεονεκτήματα:** πολύ μικρό, μετά βίας ορατό. Ιδανικό για άτομα που φορούν γυαλιά.

Ενισχυτής ακοής HA 20 (Αναλογικός) => RIC

- ✓ Ενισχύει την ένταση όλων των ήχων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ✓ Ιδανικό εάν η ικανότητα ακοής είναι περιορισμένη
- ✓ Άνετη εφαρμογή πίσω από το αυτί
- ✓ 3 εξαρτήματα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο
- ✓ Ρυθμιζόμενη ένταση σε τέσσερα βήματα
- ✓ Ενίσχυση ήχου: μεγ. 40 dB
- ✓ Μέγιστη έξοδος ήχου: 128 dB
- ✓ Εύρος συχνοτήτων: 200 - 5000 Hz
- ✓ 1 Μπαταρία και 1 εφεδρική (1,4V PR48)
- ✓ Διαστάσεις συσκευής: 27 x 42 x 42 χιλ.



Περιγραφή μονάδας

- | |
|--|
| 1. Μικρόφωνο |
| 2. Έλεγχος έντασης 1-4 (1 Ελαχ. 4 Μεγ.) |
| 3. Διακόπτης on / off
(„I“ = on, „O“ = off) |
| 4. Ακουστικό |
| 5. Ωτοασπίδα |
| 6. Χώρος μπαταρίας |



Ενισχυτής ακοής HA 50 (Αναλογικός) => RIC


beurer medical

- ✓ Απόδοση χαμηλού θορύβου και ενίσχυση της έντασης όλων των ήχων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ✓ Ιδανικό εάν η ικανότητα ακοής είναι περιορισμένη
- ✓ Άνετη εφαρμογή πίσω από το αυτί
- ✓ 3 εξαρτήματα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο
- ✓ Ρυθμιζόμενη ένταση σε τέσσερα βήματα
- ✓ Ενίσχυση ήχου: μεγ. 40 dB
- ✓ Μέγιστη έξοδος ήχου: 128 dB
- ✓ Εύρος συχνοτήτων: 100 - 6000 Hz
- ✓ 1 Μπαταρία και 1 εφεδρική (1,4V PR48)
- ✓ Διαστάσεις συσκευής: 15 x 27 x 42 χιλ.



Περιγραφή μονάδας

- | |
|--|
| 1. Μικρόφωνο |
| 2. Έλεγχος έντασης 1-4 (1 Ελαχ. 4 Μεγ.) |
| 3. Διακόπτης on / off
(„I” = on, „O” = off) |
| 4. Ακουστικό |
| 5. Ωτοασπίδα |
| 6. Χώρος μπαταρίας |

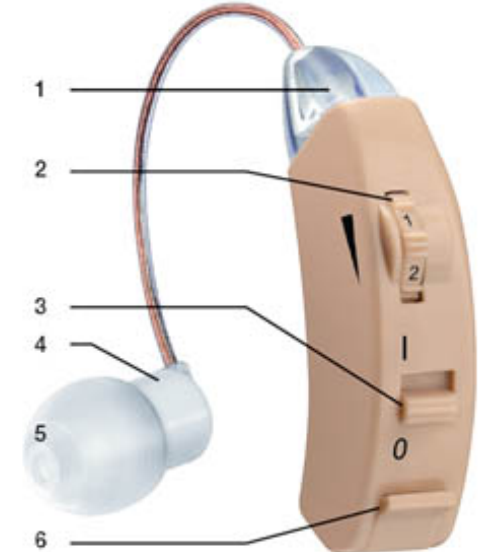

Ενισχυτής ακοής HA 60 Pair (Ψηφιακός) => ITE

- ✓ Εξαιρετικά μικρό σχήμα, τοποθετείται στο εσωτερικό του αυτιού
- ✓ Εργονομική εφαρμογή απευθείας στο κανάλι του αυτιού, οριακά ορατό
- ✓ Πρακτικό σετ 2 τεμαχίων για ενίσχυση και στις δύο πλευρές
- ✓ Ιδανικό εάν η ικανότητα ακοής είναι περιορισμένη
- ✓ Ενισχύει την ένταση όλων των ήχων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ✓ Απόδοση χαμηλού θορύβου
- ✓ 3 εξαρτήματα το καθένα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο
- ✓ Εύρος συχνοτήτων: 200 - 5300 Hz
- ✓ Ενίσχυση : μεγ. 26 dB
- ✓ Ένταση: μεγ. 113 dB
- ✓ Συμπεριλαμβάνονται 4 μπαταρίες (1.4 V) PR70/A10
- ✓ Διαστάσεις συσκευής: 19 x 10 x 14,9 χιλ.
- ✓ Εξαρτήματα και ανταλλακτικά:
 - Κάψουλες απορρόφησης της υγρασίας
 - Προστατευτικό κυψέλης αυτιού



Ενισχυτής ακοής HA 70 Pair (Ψηφιακός) => BTE

beurer medical

- ✓ Επαναφορτιζόμενος ενισχυτής ακοής
- ✓ 2 προγράμματα για θορυβώδη και ήσυχα περιβάλλοντα
- ✓ Θήκη αποθήκευσης με ενσωματωμένο φορητό φορτιστή
- ✓ Εργονομική εφαρμογή πίσω από το αυτί
- ✓ Πρακτικό σετ 2 τεμαχίων για ενίσχυση και στα δύο αυτιά
- ✓ Ιδανικό εάν η ικανότητα ακοής είναι περιορισμένη
- ✓ Ενισχύει την ένταση όλων των ήχων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ✓ Απόδοση χαμηλού θορύβου
- ✓ 4 εξαρτήματα το καθένα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο
- ✓ Εύρος συχνοτήτων: 200 - 7100 Hz
- ✓ Ενίσχυση: μεγ. 49 dB
- ✓ Ένταση: μεγ. 123 dB
- ✓ Συμπερ. 2 ενσωματωμένες μπαταρίες NiMH* - επαναφορτιζόμεν
- ✓ Διαστάσεις συσκευής: 3.7 x 2.7 x 3.1 εκ.

Note:

Up to three charges of the hearing amplifiers with one fully charged powerbank



* NiMH battery = nickel-metal hydride battery

Ενισχυτής ακοής HA 80 Single (Ψηφιακός) => BTE

beurer medical

- Επαναφορτιζόμενος ενισχυτής ακοής με μπαταρίες που αντικαθίστανται
- 2 διαφορετικά προγράμματα ακοής για θορυβώδη και ήσυχα περιβάλλοντα
- Θήκη αποθήκευσης με φορτιστή micro USB
- Εργονομική εφαρμογή πίσω από το αυτί
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αριστερό ή το δεξί αυτί
- Ιδανικό εάν η ικανότητα ακοής είναι περιορισμένη
- Ενισχύει την ένταση όλων των ήχων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Απόδοση χαμηλού θορύβου
- 4 εξαρτήματα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο
- ✓ Εύρος συχνοτήτων: 200 - 6700 Hz
- ✓ Ενίσχυση: μεγ. 48 dB
- ✓ Ένταση: μεγ. 121 dB
- ✓ Συμπερ. 2 μπαταρίες ιόντων λιθίου που μπορούν να αντικατασταθούν & Κάψουλες απορρόφησης της υγρασίας
- ✓ Διαστάσεις συσκευής: 3 x 3.5 x 4.1 εκ.



Ενισχυτής ακοής HA 80 Pair (Ψηφιακός) => BTE

beurer medical

= HA 80 Pair (ψηφιακός) με 4 μπαταρίες ιόντων λιθίου που μπορούν να αντικατασταθούν για χρήση και στα δύο αυτιά



Ενισχυτής ακοής HA 85 Pair (Ψηφιακός) => RIC

beurer^{medical}

- ✓ Επαναφορτιζόμενος ενισχυτής ακοής με αντικαταστάσιμες μπαταρίες
- ✓ 2 διαφορετικά προγράμματα ενίσχυσης της ακοής για θορυβώδη και ήσυχα περιβάλλοντα
- ✓ Θήκη αποθήκευσης με φορτιστή micro USB
- ✓ Εργονομική εφαρμογή πίσω από το αυτί
- ✓ Ιδανικό εάν η ικανότητα ακοής είναι περιορισμένη - πολύ καθαρός ήχος χάρη στο σχεδιασμό RI
- ✓ Ενισχύει την ένταση όλων των ήχων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους & απόδοση χαμηλού θορύβου
- ✓ 4 εξαρτήματα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο
- ✓ Εύρος συχνοτήτων: 200 - 8000 Hz
- ✓ Ενίσχυση: μεγ. 38 dB
- ✓ Ένταση: μεγ. 114 dB
- ✓ Συμπερ. 4 μπαταρίες ιόντων λιθίου που μπορούν να αντικατασταθούν
- ✓ Διαστάσεις συσκευής: 2.8 x 2.9 x 4 εκ.
- ✓ Εξαρτήματα και ανταλλακτικά:
 - Κάψουλες απορρόφησης της υγρασίας
 - Προστατευτικό κυψέλης




Overview



	HA 20	HA 50	HA 60 Pair	HA 70 Pair	HA 80 Single	HA 80 Pair	HA 85 Pair
Τύπος	RIC	RIC	ITE	BTE	BTE	BTE	RIC
Σήμα	Αναλογικό	Αναλογικό	Ψηφιακό	Ψηφιακό	Ψηφιακό	Ψηφιακό	Ψηφιακό
Ενίσχυση	Μεγ. 40 dB	Μεγ. 40 dB	Μεγ. 26 dB	Μεγ. 49 dB	Μεγ. 48 dB	Μεγ. 48 dB	Μεγ. 38 dB
Μεγ. Ένταση	128 dB	128 dB	113 dB	123 dB	121 dB	121 dB	114 dB
Εύρος συχνοτήτων	200 – 5.000 Hz	100 – 6.000 Hz	200 – 5.300 Hz	200 – 7.100 Hz	200 – 6.700 Hz	200 – 6.700 Hz	200 – 8.000 Hz
Διαστάσεις	27 x 42 x 42 χιλ.	15 x 27 x 42 χιλ.	19 x 10 x 14,9 χιλ.	37 x 27 x 31 χιλ.	30 x 35 x 41 χιλ.	30 x 35 x 41 χιλ.	28 x 29 x 40 χιλ.
Μπαταρίες (=> δείτε επίσης την επόμενη διαφάνεια)	2x 1,4V PR48	2x 1,4V PR48	4x 1,4V PR70/A10	2x Ni-MH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες	2x Li-Ion επαναφορτιζόμενες μπαταρίες	4x Li-Ion επαναφορτιζόμενες μπαταρίες	4x Li-Ion επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
Ειδικά χαρακτηριστικά	✓ 3 εξαρτήματα το καθένα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο	✓ 3 εξαρτήματα το καθένα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο ✓ Απόδοση χαμηλού θορύβου	✓ 3 εξαρτήματα το καθένα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο ✓ Σετ και για τα δύο αυτιά ✓ Απόδοση χαμηλού θορύβου ✓ Κάψουλες απορρόφησης της υγρασίας ✓ Προστατευτικό κυψέλης	✓ 4 εξαρτήματα το καθένα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο ✓ Σετ και για τα δύο αυτιά ✓ Απόδοση χαμηλού θορύβου ✓ 2 διαφορετικά προγράμματα ακοής για θορυβώδη και ήσυχα περιβάλλοντα ✓ Φορτιστής micro USB ✓ Κάψουλες απορρόφησης της υγρασίας	✓ 4 εξαρτήματα το καθένα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο ✓ Απόδοση χαμηλού θορύβου ✓ 2 διαφορετικά προγράμματα ακοής για θορυβώδη και ήσυχα περιβάλλοντα ✓ Φορτιστής micro USB ✓ Κάψουλες απορρόφησης της υγρασίας	✓ 4 εξαρτήματα το καθένα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο ✓ Σετ και για τα δύο αυτιά ✓ Απόδοση χαμηλού θορύβου ✓ 2 διαφορετικά προγράμματα ακοής για θορυβώδη και ήσυχα περιβάλλοντα ✓ Φορτιστής micro USB ✓ Κάψουλες απορρόφησης της υγρασίας	✓ 4 εξαρτήματα το καθένα για ατομική προσαρμογή στον ακουστικό πόρο ✓ Σετ και για τα δύο αυτιά ✓ Απόδοση χαμηλού θορύβου ✓ 2 διαφορετικά προγράμματα ακοής για θορυβώδη και ήσυχα περιβάλλοντα ✓ Φορτιστής micro USB ✓ Κάψουλες απορρόφησης της υγρασίας ✓ Προστατευτικό κυψέλης

Overview

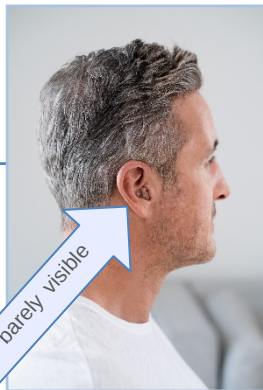

	HA 20	HA 50	HA 60 Pair	HA 70 Pair	HA 80 Single	HA 80 Pair	HA 85 Pair
Μπαταρίες	2x 1,4V PR48	2x 1,4V PR48	4x 1,4V PR70/A10	2x Ni-MH * επαναφορτιζόμενες μπαταρίες	2x Li-Ion επαναφορτιζόμενες μπαταρίες	4x Li-Ion επαναφορτιζόμενες μπαταρίες	4x Li-Ion επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
Χρόνος φόρτισης	Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο	Θήκη αποθήκευσης: 2-3 ώρες Μπαταρίες: 9 ώρες	2 ώρες	2 ώρες	2 ώρες
Διάρκεια λειτουργίας	75 ώρες	60 ώρες	≥ 26 ώρες	≥ 10 ώρες	≥ 26 ώρες	≥ 26 ώρες	≥ 26 ώρες
Ειδικά χαρακτηριστικά				✓ Με πλήρως φορτισμένη τη θήκη αποθήκευσης δυνατή έως και τρεις φορές η φόρτιση των μπαταριών ✓ Παρέχεται καλώδιο φόρτισης Micro USB	✓ Η θήκη αποθήκευσης είναι ταυτόχρονα σταθμός φόρτισης ✓ Μπαταρίες που αντικαθίστανται	✓ Η θήκη αποθήκευσης είναι ταυτόχρονα σταθμός φόρτισης ✓ Μπαταρίες που αντικαθίστανται	✓ Η θήκη αποθήκευσης είναι ταυτόχρονα σταθμός φόρτισης ✓ Μπαταρίες που αντικαθίστανται



Κάψουλες απορρόφησης της υγρασίας

- ✓ Οι κάψουλες απορρόφησης της υγρασίας είναι απαραίτητες για ενισχυτές ακοής τύπου **ITE**, **BTE** και **RIC**. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε οποιαδήποτε συσκευή ακοής
- ✓ Μια κάψουλα απορρόφησης της υγρασίας είναι κατάλληλη για την πρόληψη
- ✓ Συμπεριλαμβάνεται ένδειξη στάθμης χρώματος για να φτάσει στο τέλος της ικανότητας απορρόφησης της υγρασίας

Οι κάψουλες απορρόφησης υγρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για όλα τα μοντέλα ενισχυτή ακοής και περιλαμβάνονται ήδη στα μοντέλα:

- ✓ HA 60 Pair
- ✓ HA 80 Single / HA 80 Pair
- ✓ HA 85 Pair

.....Ενώ μπορεί να παραγγελθεί ξεχωριστά για τα μοντέλα:

- ✓ HA 70 Pair (δεν περιλαμβάνεται λόγω περιορισμένου χώρου, εξαιτίας του φορητού φορτιστή)
- ✓ HA 50
- ✓ HA 20



Προστατευτικό κυψέλης (γνωστό και ως φίλτρο κυψελίδας)

- ✓ Προστατευτικά κυψέλης για ενισχυτές ακοής τύπου **ITE** και **RIC**. Αυτοί οι ενισχυτές ακοής είναι εξοπλισμένοι με ειδικό προστατευτικό κυψέλης που προστατεύει από το κερί του αυτιού, τη βρωμιά και την υγρασία για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής
- ✓ Πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά

Το προστατευτικό κυψέλης συμπεριλαμβάνεται στα μοντέλα:

- ✓ HA 60 Pair &
- ✓ HA 85 Pair

...ενώ θα πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά για τα μοντέλα:

- ✓ HA 50 &
- ✓ HA 20



Μπαταρίες

Τα μοντέλα **HA 20**, **HA 50** και **HA 60** λειτουργούν με κανονικές μπαταρίες:

- ✓ Οι μπαταρίες για τα **HA 20 & HA 50** (τύπου 1,4V PR48) - 2 τεμάχια περιλαμβάνονται σε κάθε συσκευασία - έρχονται επίσης και σε πρακτικό σετ αντικατάστασης των 6 τεμ.
 - Διάρκεια λειτουργίας μπαταριών για το HA 20: 75 ώρες
 - Διάρκεια λειτουργίας μπαταριών για το HA 50: 60 ώρες
- ✓ Υπάρχουν 4 μπαταρίες για το **HA 60 Pair** (type 1,4V PR70/A10) που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.
 - Διάρκεια λειτουργίας μπαταριών για το HA 60 Pair: ≥ 26 ώρες (Διευκρίνιση: Το μέγεθος μπαταριών στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν το μισό μέγεθος από τις μπαταρίες που υπάρχουν στα μοντέλα HA 20/50)

Η διάρκεια λειτουργίας μπαταριών για τα **μοντέλα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας** έχει ως εξής:

- ✓ HA 70: ≥ 10 ώρες (Μπαταρία NiMH => θήκη αποθήκευσης φορητού φορτιστή
- ✓ HA 80: ≥ 26 ώρες (Μπαταρία ιόντων λιθίου)
- ✓ HA 85: ≥ 26 ώρες (Μπαταρία ιόντων λιθίου)



Παράδειγμα: Σετ μπαταριών για **HA 20 & HA 50**



Καλό είναι να γνωρίζετε

- ✓ Οι ενισχυτές ακοής προορίζονται να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ακούσουν καλύτερα, κάτι που το επιτυγχάνουν ενισχύοντας τους ήχους και στη συνέχεια μεταδίδοντας τους στο αυτί. Οι ενισχυτές ακοής δεν μπορούν ούτε να αποτρέψουν ούτε να αναστρέψουν την οργανική απώλεια ακοής!
- ✓ Ξεκινήστε με τη ρύθμιση της χαμηλότερης έντασης και αυξήστε σταδιακά μόλις εξοικειωθείτε με τη συσκευή
- ✓ Οι ενισχυτές ακοής δεν είναι κατάλληλοι για μικρά παιδιά κάτω των 36 μηνών, καθώς είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστούν προβλήματα ακοής σε αυτές τις ηλικίες
- ✓ Μην χρησιμοποιείτε τον ενισχυτή ακοής μαζί με κινητό τηλέφωνο => τα ραδιοκύματα του κινητού τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσουν θορύβους στο παρασκήνιο ή απώλεια έντασης ήχου

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό: Η γκάμα των ενισχυτών ακοής προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις χάρη στα διαφορετικά σχέδια και τεχνολογίες, καθώς κάθε σχέδιο έχει τα οφέλη του, είτε είναι BTE, RIC είτε ITE! Επιλέξτε τον ενισχυτή ακοής που σας ταιριάζει και ζήστε ξανά τη ζωή στο έπακρο!



beurer

Σας ευχαριστούμε για
την προσοχή σας!

